



Аппарат ИВЛ Puritan Bennett™ 560:

Внимание к деталям

ПАРАМЕТРЫ АППАРАТА ИВЛ

Отображаемые параметры включают дыхательный объем выдоха, чтобы убедиться, что возвращаемый объем соответствует объему вдоха.

ЦЕЛЕВОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

Целевой дыхательный объем помогает оптимизировать доставляемый дыхательный объем и потенциально снижает ночную гиповентиляцию.

БЫСТРЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПОТОКОВЫЙ ТРИГГЕР

Аппарат ИВЛ помогает снизить усилие вдоха с помощью ряда настроек:

- Педиатрическая чувствительность и чувствительность вдоха (5 уровней)
- Регулируемое время нарастания (4 уровня)
- Регулируемая чувствительность выдоха (5-95%)



УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Большой, хорошо читаемый экран дисплея
- Единый экран для установок аппарата ИВЛ
- Меню Предпочтений и Установок для простоты пользовательского интерфейса
- Отчет аппарата ИВЛ за 24 часа позволяет просматривать параметры пациента
- Автоматическое распознавание клапана

АППАРАТ ИВЛ PURITAN BENNETT™ 560 СВОБОДА ПАЦИЕНТА. УВЕРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА.




Nellcor™
Mallinckrodt™
Puritan Bennett™
Airox™
DAR™
Shiley™

Данные пациента всегда под рукой.

Программное обеспечение Puritan Bennett™ Respiratory Insight может быть использовано для просмотра, анализа и хранения данных пациента.

- USB-накопитель – перенос данных с домашнего аппарата ИВЛ в компьютер врача
- Анализ данных – загружайте и храните данные об изменениях за период до 12 месяцев и подробные диаграммы за двое суток

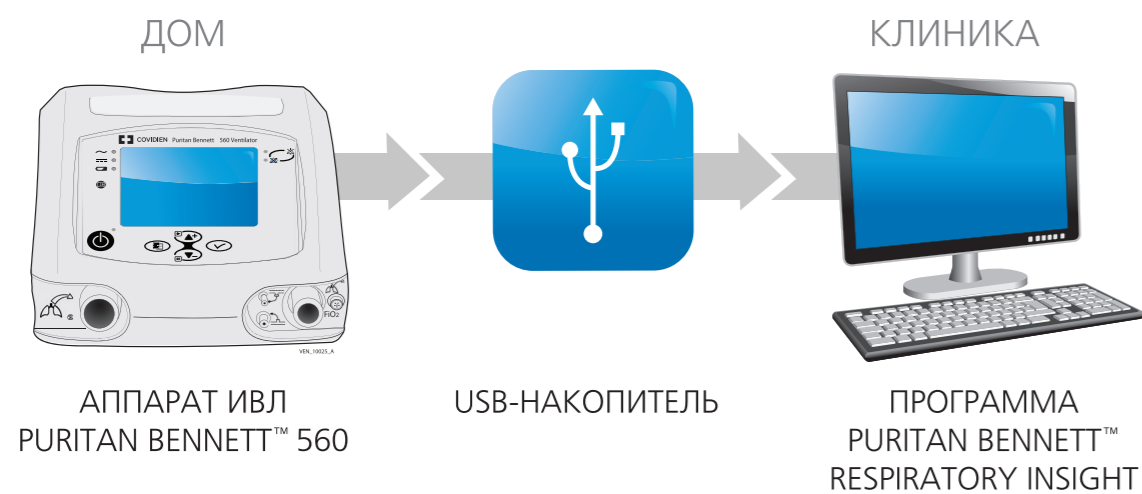

Чтобы узнать больше

За подробной информацией обращайтесь в местное торговое представительство или посетите сайт www.puritanbennett.com

Замечание: Для обеспечения мобильности пациента, аппарат ИВЛ Puritan Bennett™ 560 может быть размещен на колесной тележке или в автомобиле.



COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом, "positive results for life" и торговые марки со знаком ™ являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных структур.

Официальный представитель
Корпорации «Ковидиен» в России
ООО «Ковидиен Евразия»

115054, Москва,
ул. Дубининская,
д. 53, стр. 5

+7 (495) 933 64 69 [т]
+7 (495) 933 64 68 [ф]

RUS@COVIDIEN.COM
WWW.COVIDIEN.COM

ЖИВИ И ДЫШИ СВОБОДНО. КАК МЫ.

Простой в управлении, аппарат ИВЛ Puritan Bennett™ 560 помогает повысить безопасность пациента, лечебное воздействие и эффективность ухода.

Легкий и компактный, портативный аппарат ИВЛ Puritan Bennett™ 560 дает возможность пациентам быть более самостоятельными, обеспечивая медицинскому персоналу уверенность, благодаря надежному и проверенному аппарату ИВЛ с батареей высокой емкости.

Пациенты и ухаживающий за ними персонал оценят систему разнообразных оповещений, тихую работу, длительный заряд батареи с индикатором реального времени, возможность использования различных внешних источников питания и удобную сумку для транспортировки.

Специалисты оценят возможности управления данными, реализуемыми через установленное в системе программное обеспечение Respiratory Insight и USB флеш-накопитель, позволяющий простой перенос информации о пациенте.

 ≈ 08h50

Показания индикатора заряда батареи в реальном времени обеспечивают уверенность пациента и персонала, когда они находятся вне дома или вдали от источников электропитания.

ПЕРЕДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ, УДОБСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ.

Повышает мобильность пациента.

Аппарат ИВЛ Puritan Bennett™ 560 дает пациентам и персоналу, осуществляющему уход, уверенность в те моменты, когда они находятся вне дома и вдали от источников электропитания.

- Индикатор реального времени работы батареи – Вы видите остаток заряда батареи, в часах и минутах, в соответствии с выбранным режимом работы
- Внутренняя литий-ионная батарея – обеспечивает длительную работу вентилятора

Повышенная безопасность пациента и персонала, осуществляющего уход.

Надежный, простой в использовании аппарат ИВЛ с батареей высокой емкости помогает повысить безопасность пациента.


- Функция автоматического определения клапана – помогает установить правильный режим в зависимости от конфигурации контура
- Расходные материалы – уменьшают риск перекрестного заражения, благодаря использованию индивидуальных блоков выдоха и бактериальных фильтров



Улучшение лечебного воздействия.

Современные функции аппарата ИВЛ Puritan Bennett™ 560 помогают врачам и персоналу улучшить лечебное воздействие.

- Связанные между собой режимы работы аппарата ИВЛ и система оповещений – уменьшают опасность установки неподходящих параметров
- Экранные меню – дают возможность просмотреть отчеты и диаграммы за 24 часа
- Чувствительный и регулируемый потоковый триггер – помогает снизить усилие вдоха
- Регулируемые установки – позволяют выбрать специфические конфигурации для взрослых или детей.

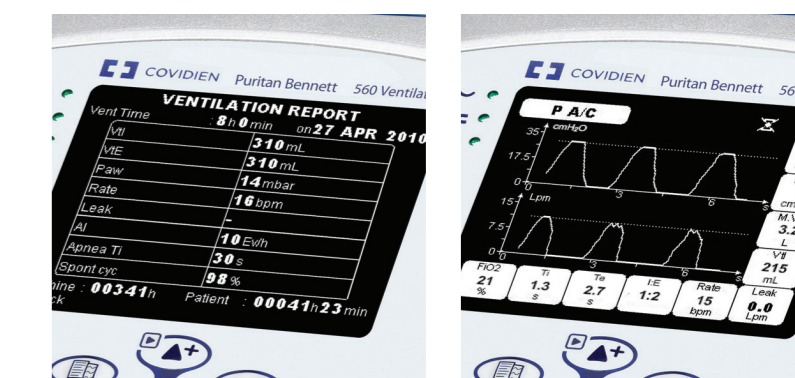

Экранные меню – дают возможность просматривать отчеты и диаграммы за 24 часа

Повышение эффективности ухода

Аппарат ИВЛ Puritan Bennett™ 560 компактен, имеет малый вес (4.5 кг) и низкий уровень шума (<30 дБА на расстоянии 1 м).

- Общая для всех моделей конструкция – сокращает время обучения врачей и персонала
- Обучение и тренинги – помогают персоналу правильно реагировать на оповещения, разбираться в системе меню и оптимально использовать возможности аппарата ИВЛ